


Στηρίγματα προσαρμογής οθόνης A-dec



Τα στηρίγματα προσαρμογής οθόνης της A-dec χρησιμοποιούν έναν από τους παρακάτω μηχανισμούς τοποθέτησης:


Κινητό

Αυτά τα στηρίγματα προσφέρουν διαρκή αντίσταση, για τη συγκράτηση της οθόνης στη θέση της μετά την τοποθέτηση.

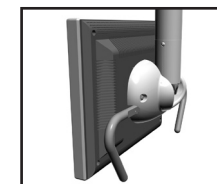

Σταθερό

Αυτά τα στηρίγματα περιλαμβάνουν μια χειρολαβή, μέσω της οποίας μπορείτε να ασφαλίσετε χειροκίνητα την οθόνη σε μια κεκλιμένη θέση.

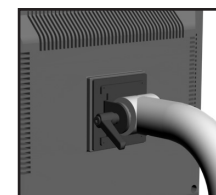

Τα στηρίγματα προσαρμογής οθόνης της A-dec συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA (Video Electronics Standards Association) και επομένως είναι συμβατά με τις περισσότερες μάρκες και τα περισσότερα μεγέθη οθόνης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα στηρίγματα προσαρμογής οθόνης της A-dec προορίζονται για την υποστήριξη και την τοποθέτηση μιας επίπεδης οθόνης ιατρικού ή αντιστοιχού τύπου. Για τις απαιτήσεις σχετικά με την οθόνη, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 3.


Ρυθμίσεις και προδιαγραφές του στηρίγματος προσαρμογής της οθόνης

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τις προδιαγραφές οθόνης για το στηρίγμα προσαρμογής σας, δείτε τις εικόνες παρακάτω και τον πίνακα στη σελίδα 3.


Στυλ 1, Κινητό

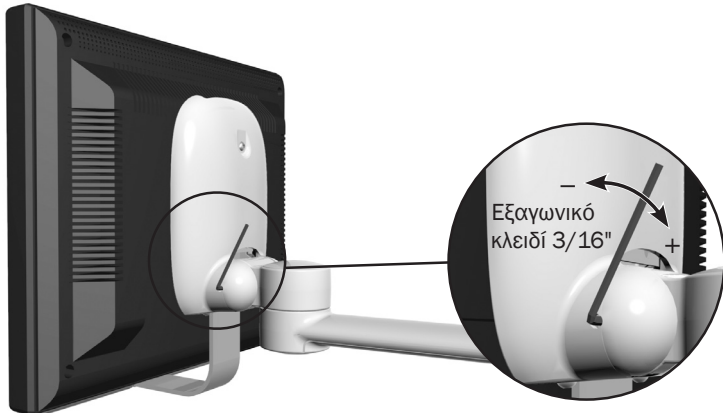


Στυλ 2, Κινητό

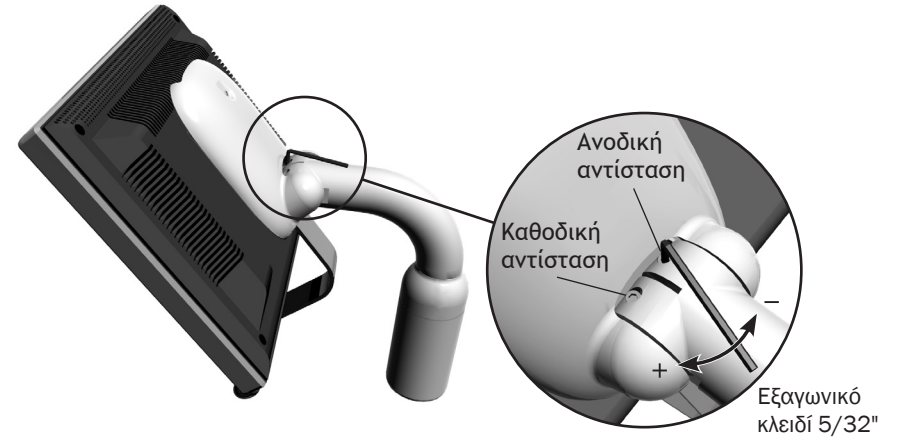

Στυλ 3, Κινητό

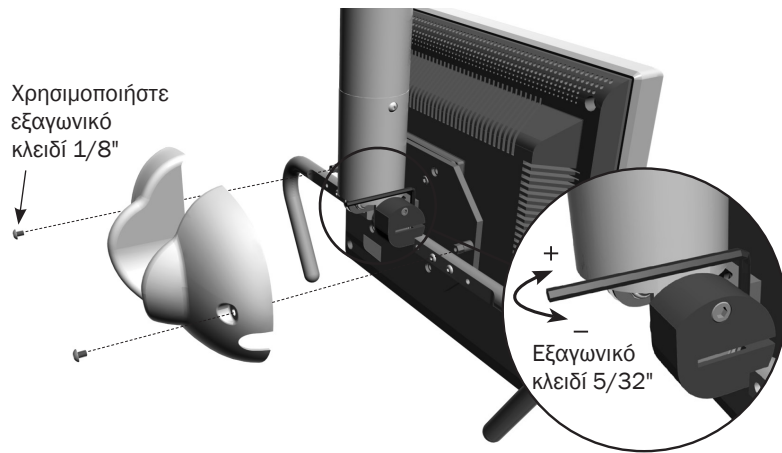

Στυλ 4, Σταθερό

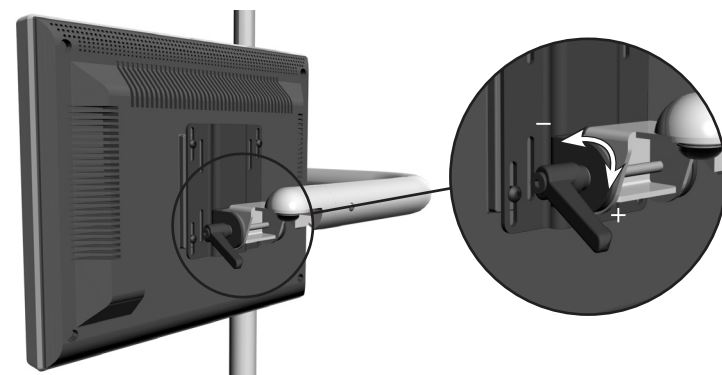

Ρύθμιση κατακόρυφης αντίστασης	Μέγεθος εξαγωνικού κλειδιού	Στυλ ρύθμισης	Διαθέσιμο για	Μέγιστο βάρος οθόνης	Μέγιστο μέγεθος οθόνης
Στυλ 1, Κινητό Περιστρέψτε το εξαγωνικό κλειδί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση.	3/16 ίντσες	Κινητό / Μονή αντίσταση	έδρες, κέντρα υποστήριξης	9 κιλά (20 λίβρες)	Διαγώνιος 483 χιλ. (19 ίντσες)
Στυλ 2, Κινητό Περιστρέψτε το εξαγωνικό κλειδί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να είναι απαραίτητη τόσο για την ανοδική όσο και για την καθοδική αντίσταση.	5/32 ίντσες	Κινητό / Διπλή αντίσταση	έδρες, κέντρα υποστήριξης, ερμάριο προσαρμοσμένο σε τροχιά	14 κιλά (31 λίβρες)	Διαγώνιος 483 χιλ. (19 ίντσες)
Στυλ 3, Κινητό Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 1/8" για να αφαιρέσετε τις βίδες του πίσω καλύμματος. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 5/32" για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κατακόρυφη αντίσταση του στηρίγματος. <i>(Σημείωση: Μπορείτε να επανατοποθετήσετε τις χειρολαβές μετά την αφαίρεση του καλύμματος. Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 1/8" για την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση των βιδών των χειρολαβών.)</i>	1/8 ίντσες 5/32 ίντσες	Κινητό / Μονή αντίσταση	οροφή, ερμάριο, τοίχος	14 κιλά (31 λίβρες)	Διαγώνιος 483 χιλ. (19 ίντσες)
Στυλ 4, Σταθερό Περιστρέψτε τη χειρολαβή δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε τη θέση της οθόνης.	Δ/Υ	Σταθερό / Με χειρολαβή	έδρες, κέντρα υποστήριξης	14 κιλά (31 λίβρες)	Διαγώνιος 483 χιλ. (19 ίντσες)

Προδιαγραφές & Εγγύηση



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τις ηλεκτρικές προδιαγραφές, την αναγνώριση των συμβόλων και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, ανατρέξτε στο έγγραφο *Κανονιστικές πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση* (A/E 86.0221.12), που είναι διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, στη διεύθυνση www.a-dec.com.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec.

Πληροφορίες για την εγγύηση παρέχονται στο έγγραφο *Κανονιστικές πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση* (A/E 86.0221.12), που είναι διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, στη διεύθυνση www.a-dec.com.



Κεντρικά γραφεία της A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
ΗΠΑ
Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά
Φαξ: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Αυστραλίας

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Αυστραλία
Τηλ: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας
Τηλ: +61 (0)2 8332 4000 εκτός Αυστραλίας

A-dec Κίνας

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Κίνα
Τηλ: +1.503.538.7478

A-dec Ηνωμένου Βασιλείου

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Αγγλία
Τηλ: 0800 ADECUK (233285) εντός Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ: +44 (0) 24 7635 0901 εκτός Ηνωμένου Βασιλείου

Μοντέλα και εκδόσεις προϊόντων που καλύπτονται στο παρόν έγγραφο

Μοντέλα	Εκδόσεις	Περιγραφή
300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Στήριγμα προσαρμογής οθόνης



86.0309.12 Rev E
Πνευματικά δικαιώματα 2016 A-dec Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.