


Ποδοδιακόπτης μοχλού A-dec

Επισκόπηση

Ο ποδοδιακόπτης ρυθμίζει τον αέρα οδήγησης στο ενεργοποιημένο εργαλείο χειρός και παρέχει σήμα μέσω του αέρα οδήγησης που ενεργοποιεί τη ροή ψυκτικού αέρα και τη ροή της ψύξης νερού.

Ο διακόπτης αξεσουάρ/chip blower ενεργοποιεί μια βοηθητική λειτουργία ή το chip blower. Το chip blower στέλνει ένα ρεύμα αέρα μέσω του εργαλείου χειρός χωρίς ενεργοποίηση της φρέζας του εργαλείου χειρός. Η βοηθητική λειτουργία εξαρτάται από την ενσωματωμένη βοηθητική συσκευή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec στην περιοχή σας.

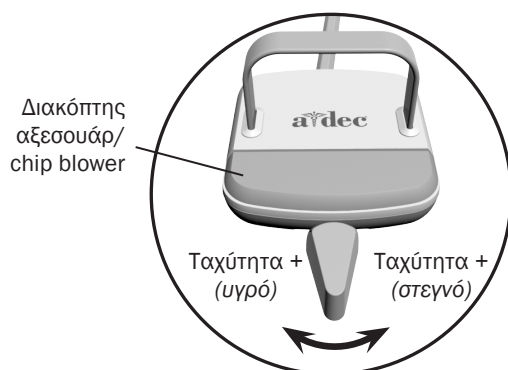

Ενεργοποίηση και λειτουργία εργαλείου χειρός

Για να ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο χειρός, ανασηκώστε το από τη βάση ή τραβήξτε το σύστημα παροχής εργαλείων χειρός προς τα εμπρός. Χρησιμοποιήστε τον ποδοδιακόπτη για να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία του εργαλείου χειρός.

Λειτουργία	Διαδικασία
Ξεκινήστε τη λειτουργία του εργαλείου χειρός με ψύξη νερού.	Μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά. Μετακινήστε τον πιο πέρα για να αυξήσετε την ταχύτητα.
Ξεκινήστε τη λειτουργία του εργαλείου χειρός χωρίς ψύξη νερού.	Μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά. Μετακινήστε τον πιο πέρα για να αυξήσετε την ταχύτητα.
Ξεκινήστε τη λειτουργία του προαιρετικού αξεσουάρ ή του chip blower.	Πατήστε το διακόπτη αξεσουάρ/chip blower.*
Χρησιμοποιήστε την ενδοστοματική κάμερα.	Μετακινήστε το μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αποτυπώσετε μια εικόνα.*

* Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec για ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία ή τη διαμόρφωση των ενσωματωμένων αξεσουάρ A-dec.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία ποδοδιακόπτη μοχλού μπορεί να αντιστραφεί από έναν τεχνικό (αλλαγή της αριστερής κατεύθυνσης σε στεγνό και της δεξιάς κατεύθυνσης σε υγρό). Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec στην περιοχή σας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του εργαλείου χειρός, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνόδευαν το σύστημα παροχής.

Προδιαγραφές & Εγγύηση

Πληροφορίες για την εγγύηση παρέχονται στο έγγραφο *Κανονιστικές πληροφορίες, προδιαγραφές και εγγύηση* (A/E 86.0221.12), που είναι διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, στη διεύθυνση www.a-dec.com.



Κεντρικά γραφεία της A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132

ΗΠΑ

Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά

Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά

Φαξ: 1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Αυστραλίας

Unit 8

5-9 Ricketty Street

Mascot, NSW 2020

Αυστραλία

Τηλ: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας

Τηλ: +61 (0)2 8332 4000 εκτός Αυστραλίας

A-dec Κίνας

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.

528 Shunfeng Road

Qianjiang Economic Development Zone

Hangzhou 311106

Zhejiang, Κίνα

Τηλ.: +1.503.538.7478

A-dec Ηνωμένου Βασιλείου

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Austin House, 11 Liberty Way

Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

Αγγλία

Τηλ: 0800 ADECUK (233285) εντός Ηνωμένου Βασιλείου

Τηλ: +44 (0) 24 7635 0901 εκτός Ηνωμένου Βασιλείου

86.0559.12 Rev A

Πνευματικά δικαιώματα 2015 A-dec Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.