


A-dec monitorarmen



De A-dec monitorarmen hebben een van de volgende afstelmechanismen:

Zwevend

Door de voortdurende weerstand van deze armen wordt de monitor na afstelling op zijn plek gehouden.

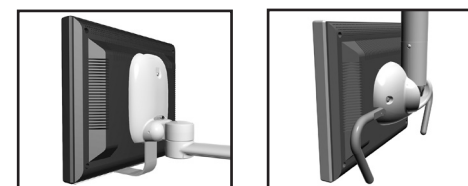

Vergrendeld

Deze armen hebben een hendel waarmee u de kantelstand van de monitor handmatig kunt vergrendelen.



De A-dec monitorarmen voldoen aan de VESA-normen (Video Electronics Standards Association). Ze ondersteunen de meeste monitormerken en -afmetingen.




OPMERKING A-dec monitorarmen zijn ontworpen voor het ondersteunen en afstellen van medische of equivalente flatscreen-monitors. Zie de tabel op pagina 3 voor monitorvereisten.


Aanpassing en specificaties van monitorarm

Zie onderstaande afbeeldingen en de tabel op pagina 3 voor informatie over aanpassingen en monitorspecificaties voor uw monitorarm.


Bevestiging 1, zwevend

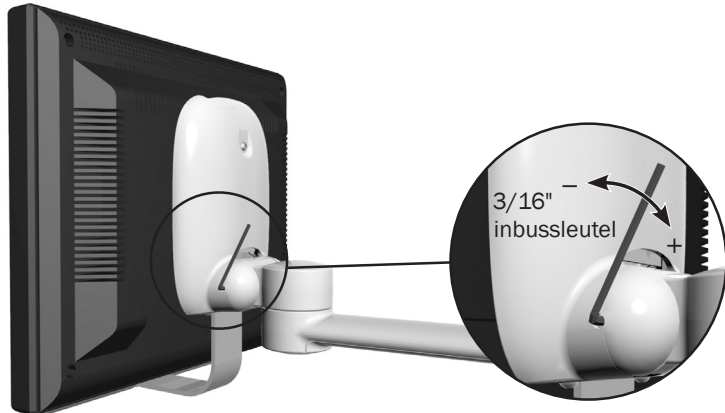


Bevestiging 2, zwevend

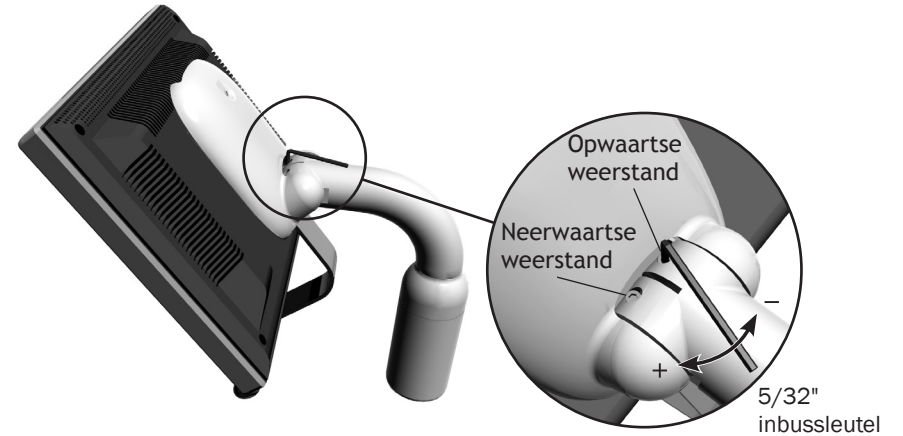

Bevestiging 3, zwevend

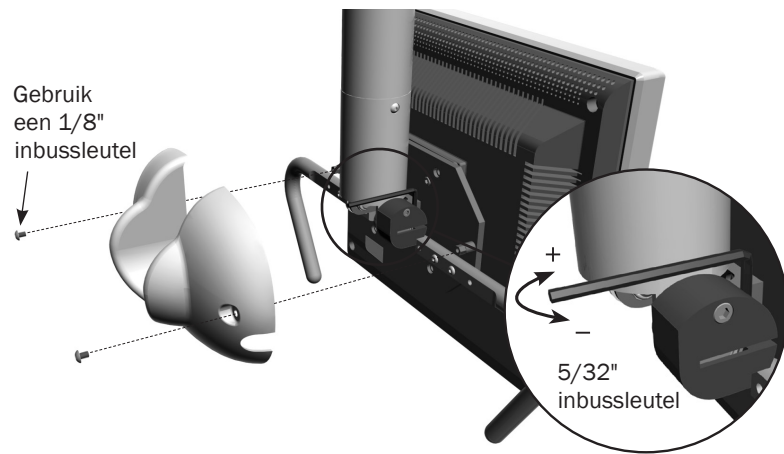

Bevestiging 4, vergrendeld

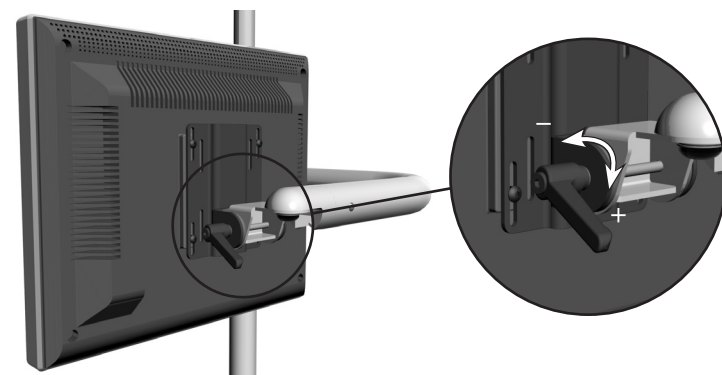

Aanpassing verticale weerstand	Maat inbussleutel	Aanpassing bevestiging	Beschikbaar voor	Maximaal gewicht monitor	Maximale afmeting monitor
Bevestiging 1, zwevend Draai de inbussleutel rechtsom om de weerstand te vergroten of linksom om de weerstand te verkleinen.	3/16"	Zwevend/ enkelvoudige weerstand	behandelstoelen, water eenheden	9 kg (20 lb)	483 mm (19 inch) diagonaal
Bevestiging 2, zwevend Draai de inbussleutel rechtsom om de weerstand te vergroten of linksom om de weerstand te verkleinen. Deze aanpassing kan voor zowel de opwaartse als de neerwaartse weerstand noodzakelijk zijn.	5/32"	Zwevend/ samengestelde weerstand	behandelstoelen, water eenheden, railbevestiging kast	14 kg (31 lb)	483 mm (19 inch) diagonaal
Bevestiging 3, zwevend Gebruik een 1/8" inbussleutel om de afdekschroeven aan de achterkant te verwijderen. Gebruik een inbussleutel van 5/32" om de weerstand van de arm te vergroten of te verkleinen. <i>(Opmerking: de hendels moeten eventueel opnieuw in de juiste stand worden geplaatst nadat de afdekplaat is verwijderd. Gebruik een 1/8" inbussleutel om de schroeven van de hendel te verwijderen en terug te plaatsen.)</i>	1/8" 5/32"	Zwevend/ enkelvoudige weerstand	plafonds, kasten, muren	14 kg (31 lb)	483 mm (19 inch) diagonaal
Bevestiging 4, vergrendeld Draai de hendel rechtsom om de monitor in de gewenste stand te vergrendelen.	N.v.t.	Vergrendeld/ hendel	behandelstoelen, water eenheden	14 kg (31 lb)	483 mm (19 inch) diagonaal

Specificaties en garantie



BELANGRIJK raadpleeg voor specificaties met betrekking tot elektriciteit, identificatie van symbolen en andere wettelijke vereisten het document *Regulatorische informatie, specificaties en garantie* (p/n 86.0221.14). Dit document is beschikbaar in de Document Library op www.a-dec.com.



OPMERKING specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Vereisten kunnen per locatie verschillen. Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende A-dec dealer.

Voor informatie over garantie kunt u het document *Regulatorische informatie, specificaties en garantie* (p/n 86.0221.14) raadplegen. Dit document is beschikbaar in de Document Library op www.a-dec.com.



Hoofdkwartier A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
VS
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Australië

Unit 8
5-9 Rickety Street
Mascot, NSW 2020
Australië
Tel: 1.800.225.010 binnen AUS
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Tel: +1.503.538.7478

A-dec Verenigd Koninkrijk

Geautoriseerde vertegenwoordiger EU
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Engeland
Tel: 0800 ADECUK (233285) binnen VK
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK

Productmodellen en -versies die in dit document worden behandeld

Modellen	Versies	Beschrijving
300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Monitormontage



86.0309.14 Rev E
Copyright 2016 A-dec Inc.
Alle rechten voorbehouden.