


A-dec hendelvoetpedaal

Overzicht

Het voetpedaal reguleert de aandrijfvlucht voor activering van het handstuk en geeft een luchtsignaal af dat de stroom van de luchtkoeling en de waterkoeling activeert.

De schakelaar voor het accessoire/de schilferblazer activeert een accessoirefunctie of de schilferblazer. De schilferblazer stuurt een luchtstroom door het handstuk zonder het handstukboortje te activeren. De accessoirefunctie is afhankelijk van de geïntegreerde hulpstukken. Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende A-dec dealer.

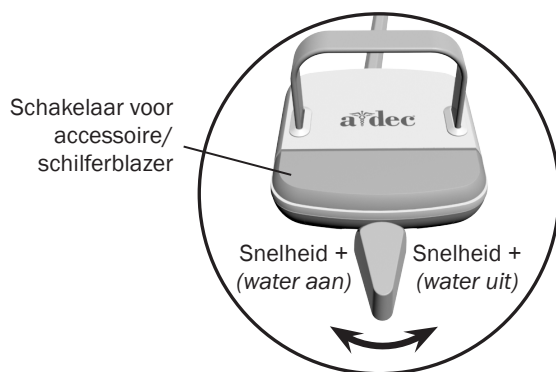

Activering en werking van het handstuk

Als u een handstuk wilt activeren, tilt u het uit de houder of trekt u de zweeparm naar voren. Gebruik het voetpedaal voor de gewenste werking van het handstuk.

Werking	Procedure
Een handstuk met waterkoeling gebruiken.	Schuif de hendel naar links. Schuif de hendel verder om de snelheid te verhogen.
Een handstuk zonder waterkoeling gebruiken.	Schuif de hendel naar rechts. Schuif de hendel verder om de snelheid te verhogen.
Het optionele accessoire of de schilferblazer gebruiken.	Druk op de schakelaar voor het accessoire/de schilferblazer.*
Bedien de intraorale camera.	Schuif de hendel naar links of rechts om een beeld vast te leggen.*

* *Neem voor vragen over de werking of configuratie van de ingebouwde A-dec-accessoires contact op met de bevoegde A-dec-vertegenwoordiger.*



OPMERKING de hendelvoetpedaalfunctie kan door een monteur worden omgedraaid (naar links voor water uit, naar rechts voor water aan). Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende A-dec dealer.



OPMERKING voor informatie over de afstelling van het handstuk raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de instrumentenbrug is geleverd.

Specificaties en garantie

Voor informatie over garantie kunt u het document *Informatie betreffende wet- en regelgeving, specificaties en garantieen garantie* (onderdeelnummer 86.0221.14) raadplegen. Dit document is beschikbaar in de Document Library op www.a-dec.com.



A-dec hoofdkantoor

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
VS
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Australië

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australië
Tel: 1.800.225.010 binnen AUS
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Tel: +1.503.538.7478

A-dec Verenigd Koninkrijk

Geautoriseerde vertegenwoordiger EU
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Engeland
Tel: 0800 ADECUK (233285) binnen VK
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK

86.0559.14 Rev A
Copyright 2015 A-dec Inc.
Alle rechten voorbehouden.