


Suportes para monitores A-dec



Os suportes para monitores A-dec usam um dos seguintes mecanismos:


Flutuante

Estes suportes proporcionam uma tensão contínua que fixa o monitor no respetivo lugar depois de este ser posicionado.

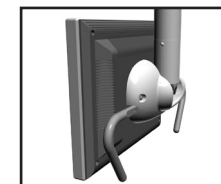

Bloqueio

Estes suportes possuem uma pega que permite bloquear manualmente a posição de inclinação do monitor.

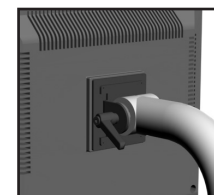

Os suportes para monitores A-dec estão em conformidade com a VESA (Video Electronics Standards Association) e, por isso, são compatíveis com a maioria das marcas e tamanhos de monitores.




NOTA Os suportes para monitores A-dec são concebidos para suportar e posicionar um monitor de grau médico ou um monitor plano equivalente. Para saber quais os requisitos dos monitores, consulte a tabela na página 3.


Ajustes e especificações do suporte para monitores

Para mais informações sobre os ajustes e especificações do monitor, consulte as imagens em baixo e a tabela na página 3.


Estilo 1, flutuante

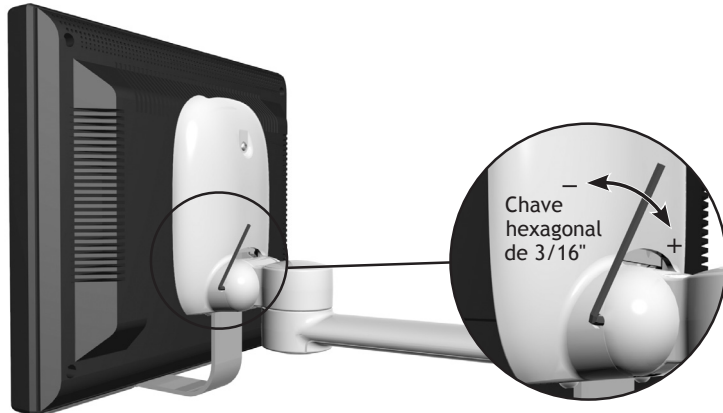


Estilo 2, flutuante

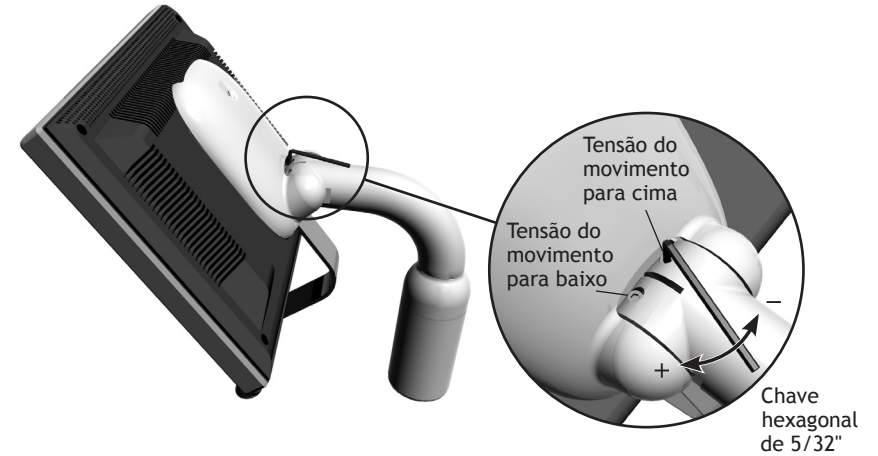

Estilo 3, flutuante

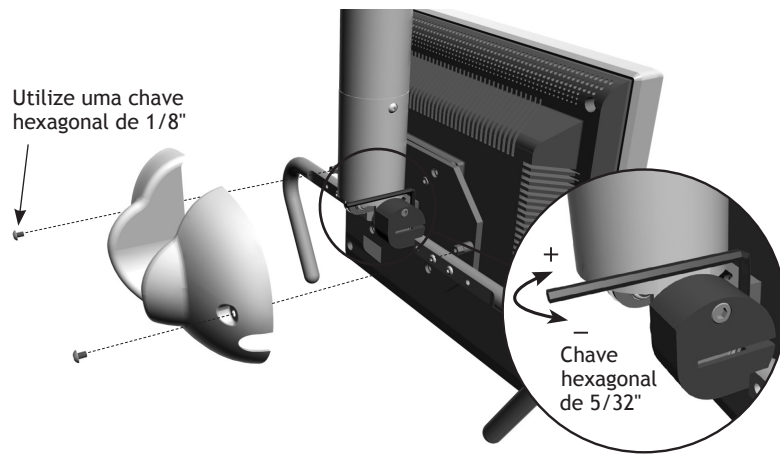

Estilo 4, bloqueio

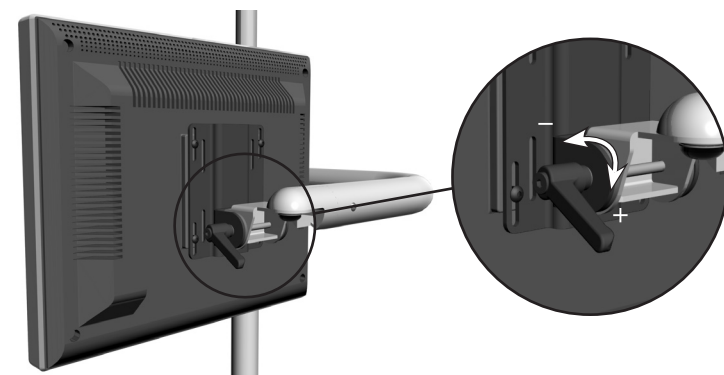

Ajuste da tensão na vertical	Tamanho da chave hexagonal	Parafuso de afinação	Disponível em	Peso máximo do monitor	Tamanho máximo do monitor
Estilo 1, flutuante Rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para diminuir a tensão.	3/16"	Flutuante/Tensão única	cadeiras, centros de suporte	9 kg (20 lb)	483 mm (19") na diagonal
Estilo 2, flutuante Rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para diminuir a tensão. Este ajuste pode ser necessário para a tensão do movimento para cima e para baixo.	5/32"	Flutuante/Tensão dupla	cadeiras, centros de suporte, suporte com calha para armários	14 kg (31 lb)	483 mm (19") na diagonal
Estilo 3, flutuante Utilize uma chave hexagonal de 1/8" para remover os parafusos da tampa posterior. Utilize uma chave hexagonal de 5/32" para aumentar ou diminuir a tensão vertical do suporte. <i>(Nota: As pegas podem ser novamente posicionadas depois de a tampa ser removida. Utilize uma chave hexagonal de 1/8" para remover e substituir os parafusos da pega.)</i>	1/8" 5/32"	Flutuante/Tensão única	tetos, armários, paredes	14 kg (31 lb)	483 mm (19") na diagonal
Estilo 4, bloqueio Rode a pega no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear a posição do monitor.	N/D	Bloqueio/Pega	cadeiras, centros de suporte	14 kg (31 lb)	483 mm (19") na diagonal

Especificações e garantia



IMPORTANTE Para saber mais sobre as especificações elétricas, a identificação dos símbolos e outros requisitos de regulamentação, consulte o documento *Informações regulamentares, especificações e garantia* (ref.^a 86.0221.08), disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.



NOTA As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os requisitos podem variar consoante a sua localização. Para mais informações, contacte o seu revendedor autorizado da A-dec.

As informações sobre a garantia são fornecidas no documento *Informações regulamentares, especificações e garantia* (ref.^a 86.0221.08), disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.



Sede da A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Estados Unidos
Telef.: 1 800 547 1883 nos EUA/CAN
Telef.: +1 503 538 7478 fora dos EUA/CAN
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Austrália

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrália
Telef.: 1 800 225 010 na AUS
Telef.: +61 (0) 2 8332 4000 fora da AUS

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Telef.: +1 503 538 7478

A-dec Reino Unido

Representante autorizado da UE
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Telef.: 0800 ADEC UK (2332 85) no Reino Unido
Telef.: +44 (0) 24 7635 0901 fora do Reino Unido

Modelos e versões do produto abrangidos neste documento

Modelo	Versões	Descrição
300, 381, 382, 482, 581, 584, 585, 586, 587, Performer 8000	A	Suporte para monitores



86.0309.08 Rev E
Direitos de autor 2016 A-dec Inc.
Todos os direitos reservados.