


Controlo por pedal de alavanca A-dec

Descrição geral

O pedal de movimentos regula o ar de acionamento para a peça de mão ativa e fornece um sinal de ar que ativa a refrigeração de ar e o fluxo da refrigeração de água.

O interruptor do acessório/jato de ar ativa a função de um acessório ou o jato de ar. O jato de ar é enviado através da peça de mão e sem ativar a broca de peça de mão. A função do acessório depende do dispositivo acessório integrado.

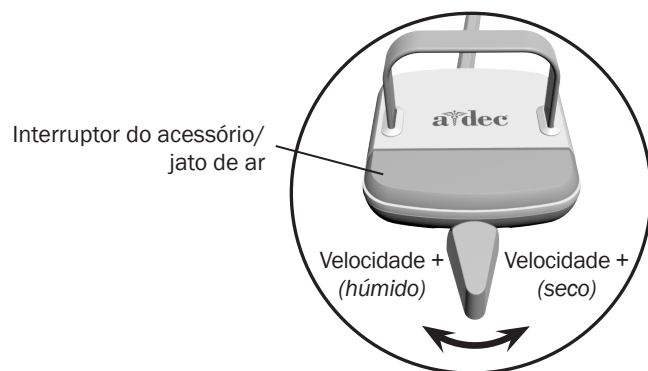

Ativação e funcionamento da peça de mão

Para ativar uma peça de mão, levante-a do suporte ou puxe o sistema de retração automática para a frente. Utilize o pedal de movimentos para realizar a operação pretendida da peça de mão.

Operação	Procedimento
Ativar uma peça de mão com refrigeração de água.	Mova a alavanca para a esquerda. Afaste-a mais ainda para aumentar a velocidade.
Ativar uma peça de mão sem refrigeração de água.	Mova a alavanca para a direita. Afaste-a mais ainda para aumentar a velocidade.
Ativar o acessório opcional ou o jato de ar.	Pressione o interruptor do acessório/jato de ar.*
Utilizar a câmara intraoral.	Mova a alavanca para a esquerda ou para a direita para capturar uma imagem.*

* Contacte o seu revendedor autorizado da A-dec se tiver dúvidas sobre o funcionamento ou a configuração dos seus acessórios integrados A-dec.



NOTA A função de controlo por pedal de alavanca pode ser invertida por um técnico (alteração da direção esquerda para seco e da direção direita para húmido). Para mais detalhes, contacte o seu revendedor autorizado da A-dec.



NOTA Para mais informações sobre o ajuste da peça de mão, consulte as instruções de utilização fornecidas com o sistema de distribuição.

Especificações e garantia

As informações sobre a garantia são fornecidas no documento *Informações regulamentares, especificações e garantia* (ref.^a 86.0221.08), disponível na biblioteca de documentos em www.a-dec.com.



Sede da A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Estados Unidos
Telef.: 1 800 547 1883 nos EUA/CAN
Telef.: +1 503 538 7478 fora dos EUA/CAN
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Austrália

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrália
Telef.: 1 800 225 010 na AUS
Telef.: +61 (0) 2 8332 4000 fora da AUS

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Telef.: +1 503 538 7478

A-dec Reino Unido

Representante autorizado da UE
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Telef.: 0800 ADEC UK (2332 85) no Reino Unido
Telef.: +44 (0) 24 7635 0901 fora do Reino Unido

86.0559.08 Rev A
Direitos de autor 2016 A-dec Inc.
Todos os direitos reservados.