


A-dec 操縱杆型腳踏控制板

概述

腳踏控制板可根據已啟動的牙科手機調節驅動空氣，並可提供一種空氣信號來啟動冷卻氣流和冷卻水流。

附件/吹屑開關可啟動附件功能或吹屑。吹屑功能可以在無需啟動牙科手機牙鑽的情形下在牙科手機噴射出氣流。附件開關的作用取決於您所整合的附件裝置。如需瞭解詳情，請與您當地獲授權的A-dec公司經銷商接洽。

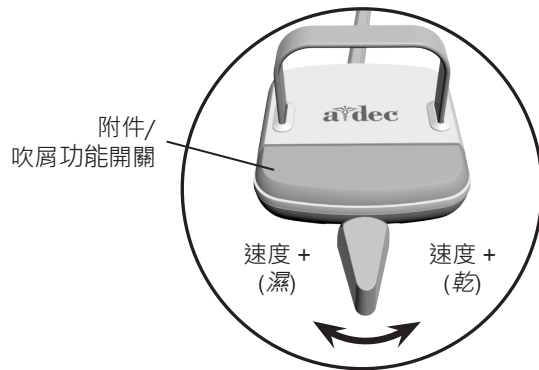

牙科手機的啟動與操作

若要啟動牙科手機，將手機從托架上取下，或將制動杆往前拉。使用腳踏控制板執行想要的牙科手機操作。

操作	程序
操控牙科手機時要帶有冷卻水流的。	將操控杆向左推。再推更多可增加速度。
操控牙科手機時不要冷卻水流的。	將操控杆向右推。再推更多可增加速度。
操控選購附件或吹屑功能。	壓一下附件/吹屑功能開關。*
操作口腔內窺鏡。	將操控杆向左或向右推可擷取影像。*

* 如果有操作方面的問題或是有關整合式 A-dec 附件的配置問題，請連絡您的 A-dec 授權經銷商。



注意 操縱杆型腳踏控制板功能可以由維修技師反轉 (更改為向左移是乾，向右移是濕)。如需瞭解詳情，請與您當地獲授權的 A-dec 公司經銷商接洽。



注意 如需牙科手機調整資訊，請參閱隨附於牙科治療台的使用說明。

規格與保固

「法規資訊、規格和產品保固」文件 (p/n 86.0221.07) 中已提供產品保固資訊，您可以在 www.a-dec.com 的文件庫中取得該文件。



A-dec 總公司

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132

美國

電話：1.800.547.1883 美國/加拿大境內

電話：1.503.538.7478 美國/加拿大境外

傳真：1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec 澳洲分公司

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020

澳洲

電話：1.800.225.010 澳洲境內

電話：+61 (0)2 8332 4000 澳洲境外

A-dec 中國分公司

A-dec (杭州) 牙科設備有限公司
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106

中國浙江省

電話：+1.503.538.7478

A-dec 英國分公司

歐盟授權代理商

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

英國

電話：0800 ADECUK (233285) 英國境內

電話：+44 (0) 24 7635 0901 英國境外

86.0559.07 Rev A
© 2015 年 A-dec Inc. 公司版權所有
本公司保留全部版權。