

A-dec 2000



a-dec®

De toegevoegde waarde van A-dec.

De beste manier om erachter te komen wat tandartsen belangrijk vinden in een behandelstoel en instrumentenbrug is door het ze gewoon te vragen. En dat hebben we gedaan. Het A-dec 200-ontwerp is gebaseerd op de manier waarop tandartsen werken en ondersteunt daardoor de doelmatigheid in uw praktijk. Alles aan de A-dec 200 weerspiegelt het niveau en de kwaliteit van de door u verleende zorg.



Met een garantie van 5 jaar.







Ontworpen om lang mee te gaan.



Puur licht. Pure betrouwbaarheid. 'Goed genoeg' is voor ons niet goed genoeg. A-dec ontwikkelt en test lampen voor een levensduur van ten minste 20 jaar.

Uw apparatuur mag u tijdens uw werk niet in de steek laten. A-dec beheert zelf de fabricageprocessen, waardoor we tandartsen kunnen voorzien van de meest duurzame en betrouwbare apparatuur. Zo bouwen en testen we elke behandelstoelcilinder van grondstof tot het voltooide product en bieden we 10 jaar garantie. En we vervaardigen zelf de hoogwaardige leidingen voor onze instrumentenbruggen. Onze productiesystemen worden voortdurend bewaakt zodat we zeker weten dat ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van A-dec. Met de A-dec 200-oplossing beschikt u over een sterk en degelijk systeem dat bedoeld is voor jarenlang intensief gebruik.





Ontworpen om te presteren.

Het A-dec 200-systeem is niet alleen gemaakt om lang mee te gaan, maar ook om met uw praktijk mee te groeien. Gedetailleerde functies zoals een vlekvrrije spittoon die naar de patiënt toe kan worden gerold, een assistentenarm met telescoopwerking voor werkzaamheden in de mond en een bedieningspaneel waarin functies van de behandelstoel, lamp en spittoon geïntegreerd zijn, leiden allemaal tot een betere workflow. Er is rekening gehouden met toekomstige uitbreiding: een open platform biedt ruimte voor het toevoegen of veranderen van hulpstukken. Optimale prestaties: nu en in de toekomst.

- Met de lichtkop met drie assen kunt u elke A-dec behandelamp in precies de juiste hoek plaatsen voor u en uw patiënt.
- Vier vooraf ingestelde posities van de behandelstoel zorgen voor extra flexibiliteit voor het plaatsen van de patiënt.
- Dankzij de ruimte voor hulpstukken kunt u in de toekomst inspringen op de groei van uw praktijk en nieuwe technologie toevoegen.
- De armsteunen met twee posities en inrichting van de zitting van de behandelstoel zorgen voor patiëntcomfort.
- Dankzij de geronde dekking en het beperkt aantal naden kan de stoel snel en gemakkelijk worden schoongemaakt.



Instrumentenbrug

Houd alles wat u nodig hebt binnen handbereik om sneller te kunnen werken.



A-dec 200



A-dec 300 Continental



A-dec 300 Traditional

Bedieningspaneel

Bediening binnen handbereik voor eenvoudige aanpassing van de behandelstoel en snelle toegang tot de besturing van de behandellamp en spittoon. Optioneel luxe bedieningspaneel dat besturingsfuncties toevoegt voor geïntegreerde klinische instrumenten, zoals elektrische motoren, camera's en tandsteenverwijderaars.



Standaard



Deluxe

Voetpedalen

Schijf met schilferblazer of nieuwe A-dec-hendel voor nauwkeurige modulatie van elektrische en pneumatische handstukken.



Voetpedaalschijf met schilferblazer



Hendelvoetpedaal

Behandellampen

A-dec-behandellampen bieden uitstekend licht voor het stellen van nauwkeurige diagnoses, ze sparen de ogen en bevorderen een goede ergonomie.



A-dec 200-halogenlamp



A-dec 300-ledlamp



A-dec 500-ledlamp

Bevestiging voor monitor

De monitor kan eenvoudig voor de patiënt worden geplaatst voor overleg met en educatie van de patiënt.



Bevestiging voor monitor

Spittoon en watereenheid

De porseleinen spittoon kan draaien, waardoor deze zich voor de patiënt altijd in de juiste positie bevindt. Eenvoudig te vullen waterfles van twee liter biedt een continue watervoorraad voor meerdere procedures. De watereenheid biedt meer dan voldoende ruimte voor het toevoegen van hulpstukken zoals amalgaamscheiders en afzuigsystemen.



Spittoon en watereenheid

Assistenten-instrumentarium

In de handige houder met drie posities en arm met telescoopwerking passen makkelijk toegankelijke afzuiginstrumenten.



A-dec (aluminium) met bedieningspaneel



Dürr (polymeer) zonder bedieningspaneel

Naadloze bekleding

Eenvoudig te reinigen en onderhouden dankzij de gladde, vacuüm-gevormde pasvorm zonder zichtbare naden. *Neem voor nauwkeurige kleurstaten en de meest recente productinformatie contact op met een erkende A-dec-dealer.*



sky blue




indigo




sapphire




amethyst

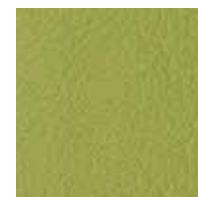

lemongrass

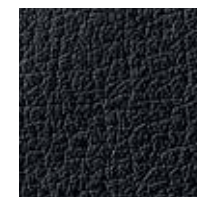

black

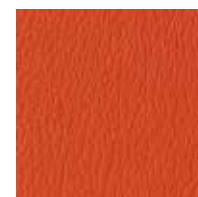

paprika



tawny

Specificaties

A-dec 200-behandelstoel

Hefhoogtebereik	400 mm tot 730 mm (15,75" tot 28,75")
Flexibele rugleuning	55 mm (2,25"), naadloos
Aandrijfsysteem	Hydraulisch zitvlak en hydraulisch kantelen
Afslagschakelaar voor rugleuning en zitvlak	Ja, stopt neerwaartse beweging bij obstructies. Articulerend voeteinde voor comfort van patiënt
Hoofdsteun	Dubbel articulerend (knopstijl)
Armsteun	Instelbaar
Geïntegreerde voeding van 300 watt	Ja
Voetschakelaar	Optioneel
Bevestigingsmogelijkheid	Zwevend - 2" na bevestiging
Bekledingsopties	Naadloos

Instrumentenbruggen

	A-dec 200	A-dec 300 Continental	A-dec 300 Traditional
Stuurblok	Standaard 4 standen	Standaard 3 standen, optioneel 4 standen	Standaard 3 standen, optioneel 4 standen
Links/rechts-omzetting	Ja	Ja	Ja
Slangopties	Vinyl of silicone	Vinyl of silicone	Vinyl of silicone
Standen van de handstukhouders	4	4	4
Remhendel(s)	N.v.t.	1 standaard, 2de optioneel	1 standaard, 2de optioneel
Bedieningspaneelopties	Geen, standaard of Deluxe	Geen, standaard of Deluxe	Geen, standaard of Deluxe
Intraorale lichtbron met vier spanningen	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Voetpedaal	Schijf met schilferblazer of hendel	Schijf, schijf met schilferblazer of hendel	Schijf, schijf met schilferblazer of hendel
Armsysteem	Gebalanceerde flexarm	Gebalanceerde flexarm met luchtrem A-dec 335-ondersteuningsbevestiging	Gebalanceerde flexarm met luchtrem A-dec 334-ondersteuningsbevestiging





Relaties opbouwen

Het hoofdkantoor van A-dec staat in Newberg, Oregon in de VS, en we hebben klanten op alle continenten behalve Antarctica. Scholen en zorginstellingen in meer dan 85 landen rekenen erop dat de apparatuur van A-dec bestand is tegen continu gebruik, dag na dag, jaar na jaar. Maar met A-dec krijgt u meer dan kwaliteitsapparatuur. U krijgt volledige service en ondersteuning tot ver na de verkoop en installatie. U krijgt lokale leveranciers en serviceprofessionals die reageren op uw behoeften en ervoor zorgen dat u aan het werk blijft. En u krijgt het voordeel van meer dan 50 jaar ervaring om uw praktijk te helpen groeien. Mocht u ooit een vraag, een bedenking of zelfs een idee voor verbetering hebben, dan zijn we niet meer dan een telefoontje van u verwijderd. Wij zijn er om u te helpen slagen, want bij A-dec bouwen we meer dan alleen apparatuur. We bouwen ook relaties.



Hoofdkantoor A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132, VS
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australië

Tel: 1.800.225.010 binnen AUS
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS

A-dec China

Tel.: 400.600.5434 binnen China
Tel.: +0571.89026088 van buiten China

A-dec Verenigd Koninkrijk

Tel: 0800 233285 binnen VK
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK

A-dec, het A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC en Radius zijn handelsmerken van A-dec Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200, en reliablecreativesolutions zijn eveneens handelsmerken van A-dec Inc. Geen enkele van de handelsmerken of handelsnamen in dit document mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gekopieerd of gemanipuleerd zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Bepaalde pictogrammen op het bedieningspaneel zijn eigendom van A-dec Inc. Het is ten strengste verboden deze pictogrammen te gebruiken, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A-dec Inc.

De getoonde kleuren en producten kunnen verschillen van de werkelijke materialen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor nauwkeurige kleurstaten en de meest recente productinformatie contact op met de erkende A-dec-dealer.



©2018 A-dec Inc. Alle rechten voorbehouden.
85.0093.14/PP/2M/3-11(10-18)/Rev A11